



Sonický držák na zubní kartáček



Příručka

Drazí zákazníci,


Těší nás, že jste se rozhodli pro koupi MAXXMEE nástavce na zubní kartáček. Tento nástavec promění téměř každý standardní zubní kartáček na sonický zubní kartáček a lze jej přizpůsobit vašim individuálním potřebám díky 6 různým vibračním režimům.

Přejeme Vám hodně radosti s naším
MAXXMEE nástavcem na zubní kartáček.

Informace k návodu na použití

Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a dobře ji uschovejte pro případné budoucí použití a otázky. Příručka je nedílnou součástí výrobku. Výrobce a dovozce nepřebírají žádnou zodpovědnost, pokud nebudou respektovány informace z této příručky.

SYMBOLY

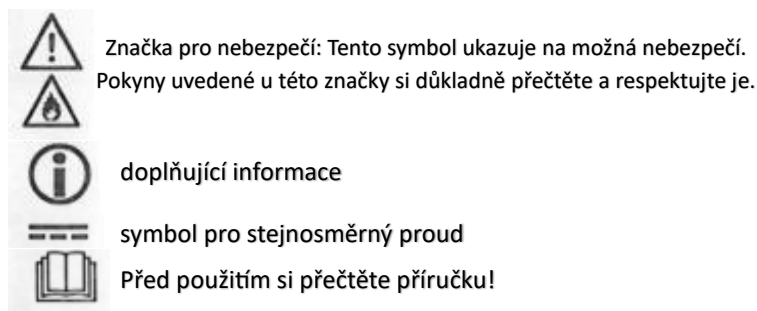

VAROVÁNÍ – Varuje před možným těžkým zraněním a ohrožením života

POZNÁMKA – Varuje před věcnými škodami.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

- Tento výrobek je určen k čištění zubů v kombinaci se standartním manuálním zubním kartáčkem. Výrobek disponuje 6 vibračními režimy.
- Tento výrobek je určen pro soukromé použití, nikoliv pro komerční účely.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v návodu k obsluze. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění

- Děti a zvířata udržujte mimo dosah obalového materiálu! Hrozí nebezpečí udušení.
- Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou s výrobkem hrát.
- Pokud vyteče akku, vyhněte se tělesnému kontaktu s kyselinou z baterie. Noste ochranné rukavice. Při kontaktu s kyselinou z baterie opláchněte postižené místo dostatkem čisté vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Hrozí nebezpečí popálení kyselinou z baterie.

Výrobek nepoužívejte, pokud vykazuje chybnou funkci. Před dalším uvedením do provozu nechte výrobek prověřit odbornou dílnou.



VAROVÁNÍ – Nebezpečí z baterií

- Výrobek s vestavěnou akku nesmí být rozebírán, vyhazován do ohně nebo vystavován vysokým teplotám přes +40°C. Akku by se mohla vznítit nebo explodovat.
- Ujistěte se, že nebude výrobek ponořován do vody, případně že nemůže do výrobku vniknout voda. Výrobek je odolný pouze proti stříkající vodě. Akku by se mohla vznítit nebo explodovat.
- Výrobek během nabíjení nezakrývejte, mohlo by dojít k přehřátí výrobku.

POZNÁMKA – Riziko materiálových a věcných škod

Výrobek odpojte od zdroje elektřiny, pokud se během nabíjení vyskytne chyba nebo před bouřkou. Při připojování nebo odpojování od napájení musí být výrobek vypnutý. Při chybách nebo poruchách výrobek ihned vypněte. Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozen. Na výrobku neprovádějte žádné změny. Nepokoušejte se výrobek sami opravovat nebo vyměňovat díly. V případě škod kontaktujte zákaznický servis. Výrobek chraňte před teplem, otevřeným ohněm, přímým slunečním světlem, mínusovými teplotami a před nárazy. Nikdy nepoužívejte žíravé nebo drsné čisticí prostředky. Mohou poškodit povrchy. V případě potřeby otřete výrobek vlhkým hadříkem. Výrobek skladujte výhradně mimo dosah dětí a zvířat na suchém a čistém místě.

OBSAH DODÁVKY

1x sonický nástavec na zubní kartáček

1x příručka


1x USB kabel (A zástrčka na micro B zástrčku)

Po vybalení proveďte výrobek na případné transportní škody. Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte jej a kontaktujte zákaznický servis. Z výrobku odstraňte případné fólie, nálepky nebo transportní ochranu. **Nikdy z výrobku neodstraňujte typový štítek a případná varování!**



Pro nabíjení na klasické zásuvce je potřeba dodatečný síťový adaptér USB, který odpovídá technickým údajům výrobku (viz typový štítek nebo „technická data“). Tento adaptér není součástí dodávky.

POPIS VÝROBKU

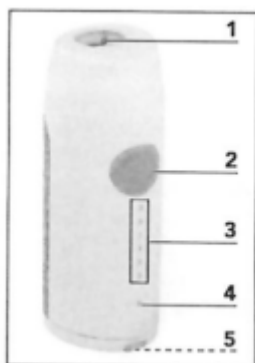

- 1 držák na zubní kartáček
- 2 ON/OFF
- 3 kontrolka režimu
- 4 kontrolka nabíjení
- 5 nabíjecí zástrčka se silikonovým krytem (Micro-B na spodní straně)

NABITÍ AKKU

Pozor!

- Výrobek nenabíjejte přes počítač, protože vysoký nabíjecí proud by mohl poškodit počítač.
-

Akku před prvním použitím zcela nabijte – tím bude dosaženo plné kapacity.

1. Sejměte silikonový kryt z nabíjecí zástrčky (5).
2. Zapojte zástrčku micro-USB dodaného kabelu USB do nabíjecí zásuvky na výrobku a zástrčku USB do zásuvky napájecího adaptéru USB.



Výrobek může být také nabíjen přes Power banku.

3. Síťový adaptér USB zapojte do dobře přístupné zástrčky. Kontrolka nabíjení **(4)** svítí během nabíjení červeně. Když nabíjecí kontrolka zhasne, je akku zcela nabitá.
4. Síťový adaptér USB vytáhněte ze zásuvky a USB kabel odpojte od výrobku.
5. Nabíjecí zástrčku zpět uzavřete silikonovým krytem.

POUŽITÍ

- V nastavci **(1)** můžete používat běžné komerční zubní kartáčky. Štětiny by při zapnutí/vypnutí **(2)** měly směřovat nahoru.
- Pro zapnutí/vypnutí zmáčkněte tlačítko na ca. 5 sekund. Výrobek se automaticky nachází v prvním vibračním režimu. Horní kontrolka **(3)** svítí zeleně.
- Pokud chcete přepnout do režimu, stiskněte vícekrát krátce tlačítko ON/OFF. Kontrolky ukazují, jaký režim je nastavený (shora dolů).
- Každý režim trvá asi 2 minuty (4x 30 sekund s krátkým přerušením) a poté se automaticky vypne. Výrobek lze také kdykoli vypnout ručním stisknutím tlačítka ON/OFF (přibližně na 5 sekund).

TECHNICKÁ DATA

číslo výrobku: 06977

číslo modelu: BG-F-6630

akku: 3,7 V (Li-Ion akku, 1200 mAh)

síťový adaptér USB: 5 V DC, 1000 mA (není součástí dodávky)

doba nabíjení: ca. 3-4 hodiny

provozní doba: max. 180 aplikací

frekvence vibrací: max. 12 000 vibrací /minutu

druh ochrany: IPX4

ID příručky: Z 06977 M DS V1 0620 dk

LIKVIDACE



Obalový materiál zlikvidujte ekologickým způsobem a recyklujte jej.



Tento produkt podléhá evropské směrnici 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Nelikvidujte tento výrobek s vestavěnou baterií jako běžný domovní odpad, ale ekologicky šetrným způsobem prostřednictvím oficiálně schválené společnosti pro likvidaci odpadu.